

magic
Mobility™

Frontier V4 RWD

**ADVENTURE
GAINED.
NOTHING LOST**



Frontier
V4™

**"CE FAUTEUIL
ROULANT M'A
REDONNÉ MA
LIBERTÉ ET A
OUVERT UN
MONDE DE
POSSIBILITÉS."**

Lisa
Nouvelle-Zélande

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE COMPLETS

Vous vous êtes bien amusé
et il se fait tard?
Allumez vos feux. Fixés sur
des supports en caoutchouc.



RELEVER LES ACCOUDOIRS...

Pouvoir rabattre les
accoudoirs n'est pas
seulement utile pour les
transferts de côté...



ASSISES ET POSITIONNEMENT

D'innombrables options pour
toutes les morphologies.
Nos assises sont facilement
ajustables et peuvent être
conçues sur mesure pour
une position fixe. Tout
dépend de vos besoins.

REPRENEZ LE CONTRÔLE

Nous offrons une gamme
complète de systèmes
de contrôle avancés et de
contrôles d'environnement.
Faciles à programmer et
faciles à utiliser.

 **SUNRISE**
MEDICAL®

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

CE

V3/FRANCE/OCT20

**BUILT
TO LAST**

**CUSTOMISED FOR
YOUR LIFESTYLE**



**AUSTRALIAN
MADE**



FRONTIER V4 REAR WHEEL DRIVE

Le fauteuil à roues arrière motrices Rear Wheel Drive (RWD) Magic Mobility est compact et très performant. Le poids placé sur les roues arrière offre une stabilité et un contrôle parfaits, en particulier dans les pentes. Ce fauteuil roulant est remarquable, que ce soit pour rouler dans les rues ou hors des sentiers battus grâce à ses roues tout terrain basse pression.

Caractéristiques de base:

- Longueur: 905 mm
- Largeur: 710 mm
- Hauteur du siège au plancher: 435 mm
- Hauteur sol-siège: 435 mm
- Rayon de giration : 660mm
- Poids maximum utilisateur 182 kg
- 155 kg avec lift ou bascule d'assise
- Vitesse maximale: 10 km/h
- Moteurs: moteur à engrenages de 800 W
- Roues arrière: basse pression tout terrain noires de 14"
- Roues arrière pneumatiques de 9"
- Batteries: 40 Ah Gel (option à 70 Ah)
- Manipulateur R-Net PG Drive
- Relève-jambes manuels séparés.

Assise et positionnement:

- Options électriques: lift de 30 cm, inclinaison d'assise et de dossier (45 degrés), dossier inclinable électrique à compensation (uniquement avec assise Rehab), relève-jambes électriques
- Relève-jambes: central ou double, avec palettes rabattables, manuels ou électriques
- Palettes de repose-pieds: double ou monobloc/escamotables/à angle ajustable, toute autre demande sur mesure
- Une gamme complète d'accoudoirs, de sangles et d'accessoires sur demande.

Options and accessoires:

- Kit d'éclairage 24V LED
- Chargeur USB
- Prise jack
- Porte-bagage, crochets pour sacs, sac, pochettes, boîtiers secrets, tablettes, porte-gobelet, support à oxygène/ventilation
- Commandes spéciales: possibilité d'avoir une commande tierce-personne, des commandes à la tête, au menton, au pied, par contacteur au souffle et un contrôle d'environnement.



OFFROAD - BLACK RIMS



HYBRID - GREY



HYBRID - BLACK

"NOUS CRÉONS DES FAUTEUILS ROULANTS SUR MESURE DEPUIS 25 ANS POUR QUE VOUS PUISSIEZ VIVRE VOTRE VIE LE PLUS SIMPLEMENT POSSIBLE"

Ashley Daff
Directeur




LE SOUCI DU DÉTAIL

En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous pouvons concevoir un fauteuil roulant qui sera entièrement vôtre. Nous connaissons les petits détails qui font toute la différence.

DES PRODUITS CONÇUS POUR DURER

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Votre fauteuil roulant étant votre mode de déplacement, la fiabilité est primordiale. Nous préférons prendre le temps d'améliorer la conception de nos produits plutôt que d'avoir à les réparer.

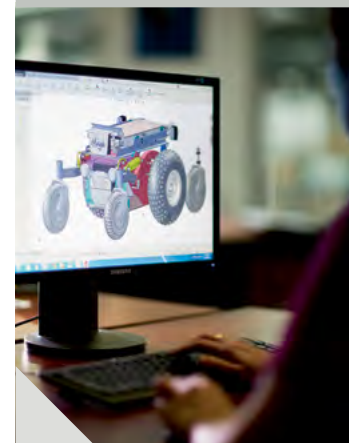

DES PRODUITS RÉFLÉCHIS JUSQU'AU MOINDRE BOULON

Dès que nous pensons pouvoir améliorer nos produits, nous le faisons. Notre équipe interne d'ingénieurs travaille directement avec des clients et des thérapeutes. Toute l'équipe Magic travaille sans relâche pour améliorer votre expérience et les performances au quotidien de votre fauteuil Magic Mobility.

FIÈREMENT CONÇUS ET FABRIQUÉS EN AUSTRALIE

Nous sommes heureux d'offrir des produits fabriqués en Australie. Nous aimons rencontrer nos clients, connaître leurs besoins toujours changeants et en prendre bonne note pour retourner à nos croquis.

*certains modèles exclus



Magic Mobility +61 3 8791 5600
sales@magicmobility.com.au

Explore with us magicmobility.com.au



Scan for agent locations