

冒険のための完全装備

自分の限界に挑戦するのが好きな人向け。どこまで遠くへ冒険に行きますか？

オフロード 機能 & アクセサリー

XT4は、冒険をサポートし、その装備を充実させるために設計された、さまざまな電動機能、シート、アクセサリを備えています。趣味を楽しんだり、新しい場所を探索したり、ビーチに出かけたり、一日中快適に過ごせます。

パンク防止キットやカメラの取り付け、日よけや釣り竿ホルダーなど、アウトドアに必要なあらゆるアクセサリをご用意しています。



リハブ または MPS シート

リハブシート または MPS シートとバックサポートのほか、持ち運びに便利な前方折りたたみ式背もたれや取り外し可能な背もたれ、スイングアウェイジョイスティック マウント、各種ヘッドレストなど、幅広いオプションからお選びいただけます。

すべての主要なシーティングオプションは、Magic Mobilityのラインナップに標準装備されています。



選べる ベースカラー


最も人気の高い3色からお選びください。なめらかで上質なメタリック仕上げが、驚きを与え、XTシリーズに深みと奥行きを与えています。




XT4 製品仕様

耐荷重	電動 リフト/ティルト 付き	160kg
	固定フレーム	182kg
最大速度		10km/h
最大速度 (シート昇降時)		5km/h
ベース長		1000mm / 39"
ベース幅		700mm / 27.5"
ホイール	オフロード 空気入り 145 / 70-6	
座面高		480mm / 19"
最低地上高		125mm / 5"
回転半径		1410mm / 55.5"
モーター	4 x 700W インライン ギア	
車いす重量 (最小)	ベース、バッテリー、リハブシート、センターポストレッグレスト、電動リフト機能なし	185kg
(標準)	ベース、バッテリー、リハブシート、電動リフト、ティルト、リクライニング、レッグレスト付き	220kg
電子機器		R-net
バッテリーサイズ		115Ah (C20)
シート (幅 & 奥行)		305-610mm / 12-24"

標準 電動機能

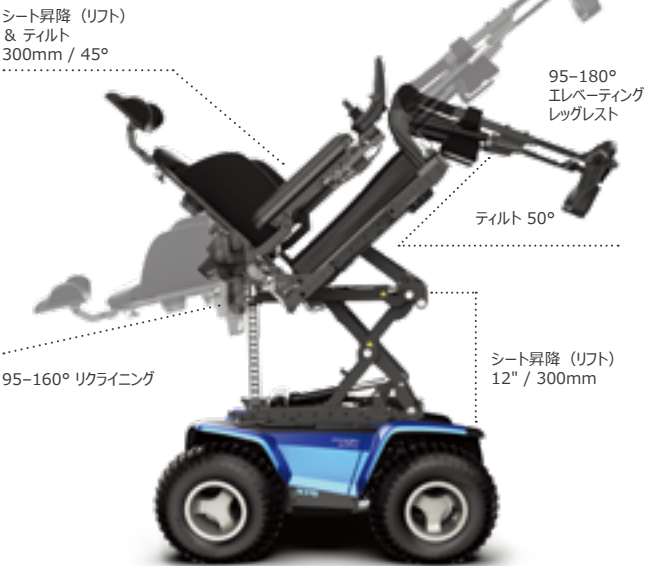

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
TEL : 0480-31-6480
お問い合わせ : info@sunrisemedical.jp

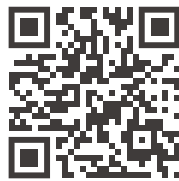

QRコードをスキャン

車いすには電動モーターが搭載されていますので、絶対に水中や川、小川、海などを走行しないでください。最新バージョンはオンラインでご確認ください。当パンフレットに記載されている情報および仕様は、印刷時点のものであり、変更される場合があります。
©Magic Mobility. オーストラリア製



magic
Mobility™

XT4

オフロードも進める
計り知れないパワー



XT4™

XT4™

VENTURE *Further*

もっと冒険を

XT4は、街中に適した全長で、世界で最も過酷なオフロード走行が可能な電動車いすです。前後サスペンションとサーボ電動ステアリングを備え、平坦ではない世界の中で、個人の自由の限界を広げるように設計されています。

高効率ヘッドライトと大容量バッテリーと標準装備し走行距離を伸ばしたXT4は、これまで以上に安心して、より遠くまで冒険するために必要なすべてを提供します。



正確な 前進&後退 コントロール

滑りやすい路面や けん引力の弱い路面でも、この車いすの直感的なステアリング操作は、前進でも後退でも、信頼性、応答性、コントロール性を感じさせます。XT4は、ホイールのスピードの差異と業界をリードするサーボ ステアリング モジュールを独自の組み合わせで使用しながら進みます。

一体型 LEDライト

暗闇の中で迷わないように！前方と後方に内蔵されたLEDライトシステムが、あなたの行き先を明るく照らします。



特許取得済みの優れたサスペンション

究極の4WDけん引力と安定性

当社の特許取得済みサスペンションと、4つの駆動輪それぞれに供給されるモーターのパワーが相まって、究極の障がい物の乗り越え、けん引力、コントロールを実現します。

各前輪と後輪は軸のあるアームに取り付けられており、地形の凹凸に合わせてそれぞれ独立して動きます。

これにより、4つの車輪を常に地面に接地させることができ、最も過酷なオフロードの地形でも、よりスムーズな乗り心地と高い安定性、コントロール性を実現します。

改良型バッテリー

より遠くへ、より長く、より多くのことを見よう

XT4には大容量* バッテリーが標準装備されています。パワフルな4WDとしては非常に優れた走行距離を実現し、冒険に満ちた探検の幅を広げ、長距離を進む自信を高めます。

これで、より遠くへ、より長く、より安心して行くことができます。

*C20放電レートで115Ah



縁石なんて朝飯前

止められないパワーを体感してください

700Wのパワフルなモーターを4つ搭載したXT4は、あらゆる地形を突っ切り、人生の難関に挑むために必要なパワーを提供します。

つまり、もし「XT4で、〇〇に行けますか？」という質問を頂いたなら、私たちの答えは 大方「YES」です！

Because the world's not flat™