

VIAJAR COM CONFORTO E ESTILO

Prepare-se para a viagem equipando o seu banco com tudo o que precisa. Escolha entre uma variedade de opções concebidas para lhe proporcionar o máximo conforto, o apoio ideal e um estilo que reflita a sua personalidade.

OPÇÕES PARA VIAGENS LONGAS

Prepare a sua cadeira com tudo o que precisa para uma viagem de um dia! Escolha acessórios como suportes para copos, caixas de arrumação, porta-bagagens, sacos para acessórios, suportes para telemóveis e carregadores para maior comodidade. Além disso, selecione as opções de assento e as características de potência de que necessita para se manter confortável durante todo o dia.



ASSENTOS MPS OU DE REABILITAÇÃO

Escolha entre os nossos assentos e encostos MPS e Rehab, juntamente com uma gama de opções adicionais, tais como encostos rebatíveis ou amovíveis para facilitar o transporte, suportes de joystick rebatíveis e uma vasta seleção de apoios de cabeça. Todas as opções básicas de assentos estão incluídas como padrão em toda a gama Magic Mobility.



ESCOLHA A SUA COR DE BASE


Escolha entre as nossas três cores mais populares. O nosso acabamento metálico elegante e de alta qualidade dá um toque dramático e acrescenta profundidade e dimensão à gama XT.



ESPECIFICAÇÕES XT2

PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR		136kg
VELOCIDADE MÁXIMA		10km/h
VELOCIDADE MÁXIMA (com elevação)		5km/h
LONGITUDE DA BASE		1110mm
LARGURA DA BASE		685mm
RODAS		Pneumático urbano 14" x 3"
ALTURA DO ASSENTO AO SOLO		480mm
DISTÂNCIA DO SOLO À BASE		100mm
RAIO DE GIRO		1750mm
MOTORES		2 x 850W em linha
PESO DA CADEIRA	(mínimo)	Base, baterias, assento rehab, apoio central para os pés, sem elevação elétrica 177kg
	(padrão)	Base, baterias, assento rehab com elevação elétrica, basculação, reclinção e apoio para os pés 212kg
ELETRÔNICA		R-net
BATERIA		115Ah (C20)
ASSENTO	(largura e profundidade)	305-610mm

FUNÇÕES ELÉTRICAS DE SÉRIE

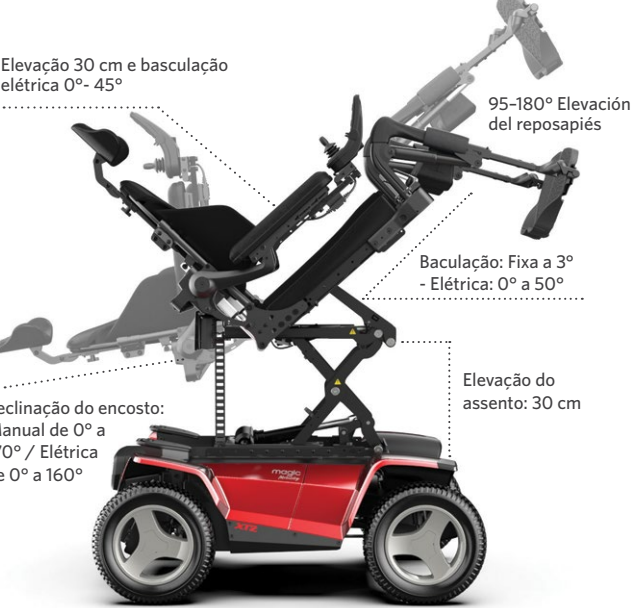

Because the world's not flat

Magic Mobility +61 3 8791 5600
enquiries@magicmobility.com.au
Sito WEB: magicmobility.com.au



Escaneie o código QR para mais informações.



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya,
Telefone +34 (0) 902 14 24 34
Fax +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt



XT2_PORT_JUNE2025_v04



A Sua Viagem,
O Seu Caminho



Por favor, lembre-se de que sua cadeira de rodas possui motores elétricos e NUNCA deve ser conduzida através da água, nem dentro de rios, córregos ou no mar. As informações e especificações contidas neste catálogo estão corretas e atualizadas no momento da impressão, mas podem estar sujeitas a alterações.
©Magic Mobility. Produto da Austrália.



A Aventura DE VIVER ESPERA POR SI

A XT2 foi concebida para aventuras ao ar livre e distâncias mais longas do que nunca. Desfrute de uma condução estável graças à tração traseira, à distância entre eixos e à suspensão independente em ambas as rodas. Equipada com motores potentes e baterias de longa autonomia, proporciona um desempenho fiável em todas as viagens. A sua direção servo-assistida, operada por joystick, permite manobras precisas e fáceis. Personalize-a ao seu gosto com diferentes opções de assentos e uma variedade de acessórios concebidos para acompanhar nas suas viagens. Mova-se livremente, vá mais longe. É o seu caminho, faça-o à sua maneira.



SUSPENSÃO E ESTABILIDADE PATENTEADAS

Suspensão dianteira e traseira independentes

Cada roda está ligada a um braço pivotante individual que se ajusta de forma autónoma para se adaptar a terrenos irregulares. Isto permite que as quatro rodas mantenham um melhor contacto com o solo, mesmo a velocidades elevadas e em superfícies irregulares. O resultado é uma maior estabilidade, conforto e controlo, proporcionando uma experiência de condução segura e sem esforço.

AUTONOMIA PARA TODO O DIA

Com baterias de 115 amperes-hora

A XT2 vem equipada de série com baterias de elevada capacidade*, proporciona-lhe uma maior autonomia por carga em comparação com as nossas opções padrão. Isto permite-lhe desfrutar de passeios mais longos ao ar livre com a tranquilidade de saber que pode regressar em segurança no final do dia.

*115 Ah a uma taxa de descarga de C20.



ILUMINAÇÃO LED INTEGRADA

Não fique às escuras! Ilumine o seu caminho com confiança graças ao nosso sistema de iluminação LED integrado à frente e atrás.



POTÊNCIA SEM ESFORÇO

Motores de 850 watts

A XT2 inclui dois potentes motores em linha de 850 watts, um para cada roda traseira, que fornecem a potência de que necessita para se deslocar rapidamente, subir colinas com facilidade e ultrapassar obstáculos na estrada. Vá mais longe, sem limites.



CONTROLO PRECISO EM QUALQUER DIRECÇÃO

Direção servo-assistida

O XT2 move-se com precisão graças a uma combinação de velocidades diferenciais das rodas e a um avançado sistema de direção servo-assistida, líder na indústria. O seu joystick intuitivo proporciona uma experiência de condução fiável, reativa e sem esforço, independentemente da velocidade.

Because the world's not flat™